



Westfalen

Klare Ansagen: Mit mir sparen Sie Zeit und Ressourcen.

COMFY®, das digitale Ventil
für eine optimale Sauerstoff-
versorgung.

Das **COMFY®** digitale Ventil sorgt für
klare Ansagen, Präzision und Effizienz
bei der mobilen Sauerstoff-Versorgung.



westfalen.com/comfy



Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001 Reg. Nr. 1709
für Deutschland

Alles Comfy? Zeit für das, was wirklich wichtig ist.

Wissen Sie, wie lange der Sauerstoff bei der Versorgung Ihrer Patienten reichen wird? Geben Sie Flaschen aus Sicherheitsgründen vorsorglich zurück, weil Sie unsicher über den Restfüllstand sind? Wissen Sie, wie viele Ressourcen für die Logistik Ihrer Sauerstoffflaschen im Krankenhaus erforderlich sind? Und wie viel Zeit es für die Ermittlung der Restlaufzeit braucht?

Das **COMFY®** digitale Ventil lässt Ihnen mehr Zeit für Ihre Arbeit und Ihre Patienten. **COMFY®** kommuniziert ganz einfach digital und meldet, wenn der Flasche bald die Luft ausgeht. Und es unterstützt Sie bei Ihren Anforderungen rund um Prozessoptimierung, Kostenminimierung und Effizienz.

Profitieren Sie von einer optimalen Ausschöpfung des Sauerstoffbestandes sowie von den Vorteilen eines reibungslosen Logistikmanagements. Die integrierte Alarmfunktion weist vorsorglich auf kritische Momente hin, zum Beispiel auf einen niedrigen Füllstand.

- > **Präzision:** exakte Anzeige des Füllstands, der Restlaufzeit und des Flaschendrucks
- > **Sicherheit:** Alarmfunktion bei geringer Füllmenge
- > **Effizienz:** Sauerstoff effizient einsetzen und ausschöpfen

Die Vorteile :

- Das übersichtliche digitale Display zeigt den Füllstand und die verbleibende Nutzungsdauer zuverlässig an
- Alarmfunktion: Sicherheitssignale bei Unterschreiten von $\frac{1}{4}$ des Flascheninhalts und kurz vor Leerstand
- Sichere Aufhängungsvorrichtung und Tragegriff
- Für den Einsatz am MRT geeignet
- Schnellkupplung und Schlauchnippel als Entnahme-Anschlüsse
- Hochwertige Aluminiumflasche
- **COMFY®** lässt sich einfach an die simplinic Software anbinden

Ausführung	Fülldruck	Materialnummer
2 Liter	200 bar	A001201024975
5 Liter	200 bar	A001201054975




Mich können Sie ganz schnell finden.


Mit simplinic Sauerstoffflaschen orten und den Bestand abrufen.



Sie wissen gerade nicht, wo und wie viele Sauerstoffflaschen sich in Ihrer Krankenhauslandschaft befinden? Das ist ganz unkompliziert herauszufinden. Bluetooth-Low-Energy-Sender im **COMFY®** Ventil ermöglichen eine Echtzeit-Lokalisierung der Flasche. Hierzu ist es mit der intelligenten Software simplinic verbunden. Diese kann jederzeit den Bestand tracken und die Flaschen raumgenau orten.

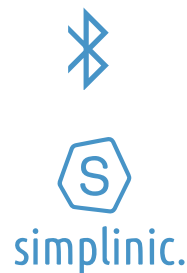

Die Zukunft ist vernetzt

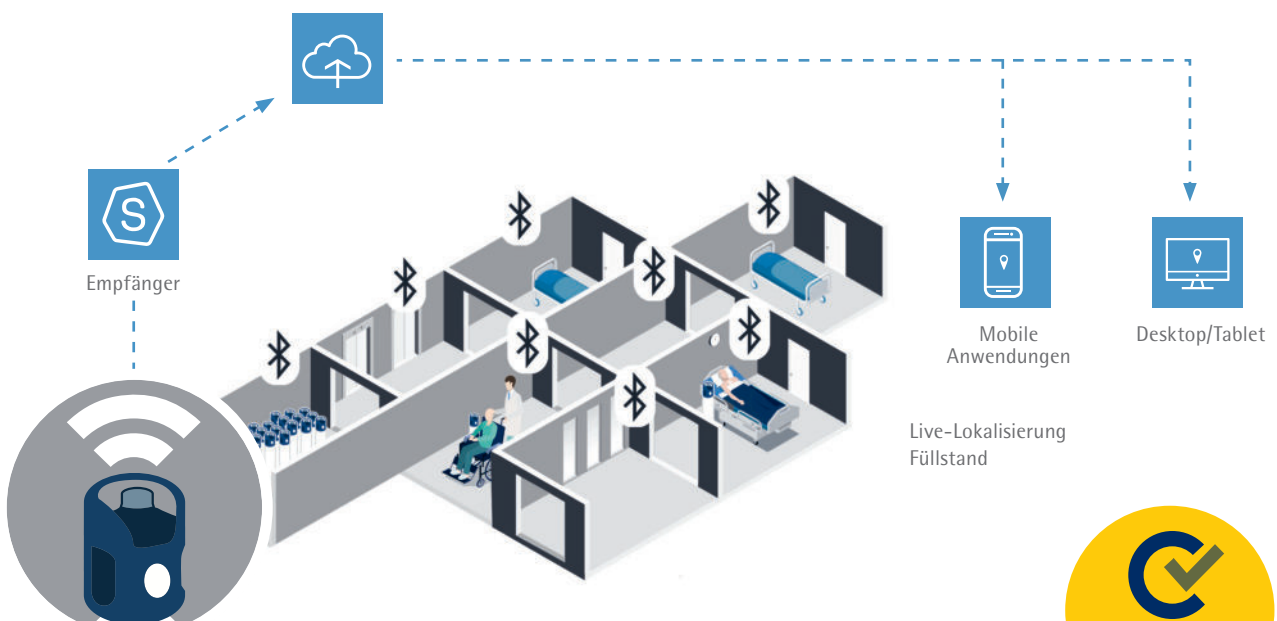

Die Integration der Sauerstoffflaschen in die simplinic Software ist ausschließlich für das Lokalisieren der Flaschen und Ablesen der Füllstände zur Optimierung der Verfügbarkeit gedacht, nicht für medizinische Zwecke.





Westfalen

Gase | Energieversorgung | Tankstellen

Westfalen AG
Industrieweg 43
48155 Münster
Deutschland
Tel. +49 251 695-0
www.westfalen.com
info@westfalen.com